



Procédure d'utilisation du test


CHW Ag/Anaplasma Ab/E.canis Ab/LSH Ab



Dose d'échantillon (ligne noire): 1 goutte (10 μ l)

1

Prélèvement &
dépôt des échantillons

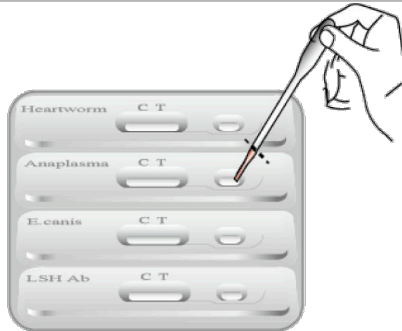


1 goutte d'échantillon (10 μ l) dans les
puits de prélèvement

⚠ Ne pas surdoser l'échantillon

2


Absorption

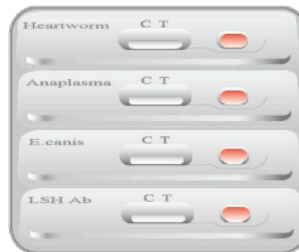

Attendre une complète absorption

3

Ajout du réactif

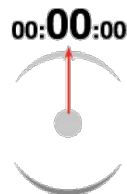


2 gouttes de réactif
Après complète absorption


4

Lecture

00:05:00~00:10:00

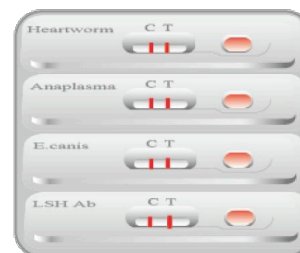

+

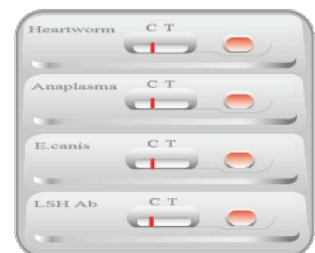

-

Lecture des résultats entre 5 et 10 min

Jeter le kit utilisé

Résultats invalides après 10 min

5

Elimination

00:10:00

