

Anleitung zur Benutzung des FPV Ag test



Fülllinie (schwarzer Strich) 4 Tropfen : 100µl

1

Probenahme

1. Kein Klebstreifen. Keine feste Kotteilchen

2. Nicht überladen

Maximum 30mg Kot Auftragen
(Abbild: Tupfer mit 30mg Kot)



Das Probenentnahmeröhrchen
mit dem Tupfer schütteln



2

Geklärte


Flüssigkeit benutzen



Warten bis die
Kotpartikeln sich am
Boden sammeln



Geklärte Schicht zur
Entnahme mit der Pipette
Kotpartikel
Schicht

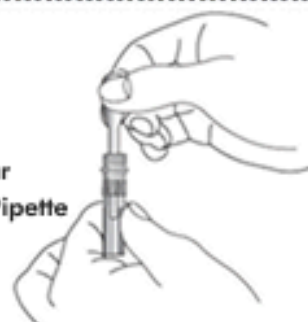

3

Probefeld laden

4 Tropfen (100µl) Verflüssigte Probe
⚠ Nicht überladen



4

Ablesen

00:05:00-00:10:00



Innerhalb 5 bis 10 Minuten Ergebnis ablesen



5

Entsorgen

00:10:00



Dispositiv entsorgen

Nach 10 Minuten wird das Ergebnis ungültig

