


Anleitung zur Benutzung des test : Feline Toxo IgG Ab / IgM Ab



Fülllinie (schwarzer Strich) 1 Tropfen (10µl)

1

Probenahmen & eingeben

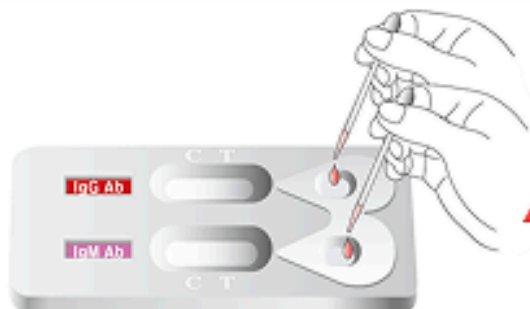

1 Tropfen Probe (10 µl) in die Probenvertiefungen

⚠ Nicht überladen!

2

Aufnahme



Warten bis die Probe aufgenommen ist

3

Reaktionsmittel zufügen

00:00:00



⚠ Nach vollständiger Aufnahme!

2 Tropfen Reagenzflüssigkeit



4

Ablesen

00:05:00 ~ 00:10:00



+



Innerhalb 5-10 Minuten Ergebnis ablesen

-



5

Entsorgen

00:10:00



Dispositiv entsorgen

Nach 10 Minuten wird das Ergebnis ungültig

