


Procédure d'utilisation du test Feline Toxo IgG Ab / IgM Ab



Dose d'échantillon (ligne noire): 1 goutte (10 μ l)

1

Prélèvement & dépôt des échantillons

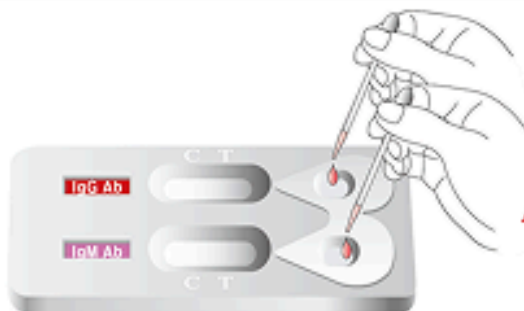

1 goutte d'échantillon (10 μ l)
dans les puits de prélèvement

⚠ Ne pas surdoser l'échantillon

2

Absorption



Attendre une complète absorption

3

Ajout du réactif

00:00:00



⚠ Après complète absorption

Ajouter 2 gouttes de réactif



4

Lecture

00:05:00 ~ 00:10:00



+



Lecture des résultats entre 5 et 10 min

-



5

Elimination

00:10:00



Jeter le kit utilisé

Résultats invalides après 10 min

