


Istruzioni per il test FeLV/FIV



Linea di riempimento del campione (linea nera): 1 goccia (10 µl)

1 Prelievo e caricamento

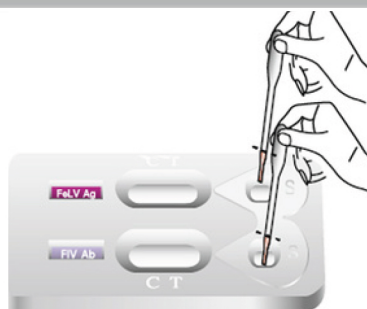


2 goccia di FeLV

1 goccia di FIV Ab

Non sovraccaricare con il campione

2 Assorbimento

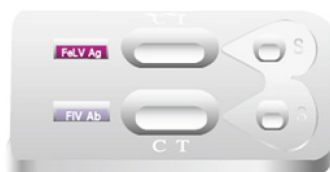

Attendere il completo assorbimento.

3 Aggiunta della soluzione tampone



2 gocce di soluzione tampone
****dopo il completo assorbimento.**




4 Lettura

00:05:00~00:10:00



+

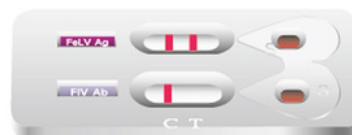

Leggere il risultato tra 5 e 10 minuti.

-



5 Smaltimento

00:10:00



Eliminare il dispositivo utilizzato.

Risultato non valido dopo 10 minuti.

