

Istruzioni per il test Giardia



Quantità di campione: 100 μ l

****Dimensioni reali del contagocce**

1

Campionamento

1. Non utilizzare feci appiccicose o grumose.
2. Non raccogliere una quantità eccessiva di feci.

quantità massima 30 mg (Fig. Tampone con 30 mg di feci)



Mescolare il tampone nella soluzione tampone

2

Utilizzo dello strato surnatante




Attendere che le particelle di feci si depositino sul fondo



Strato surnatante da utilizzare

Strato di particelle di feci

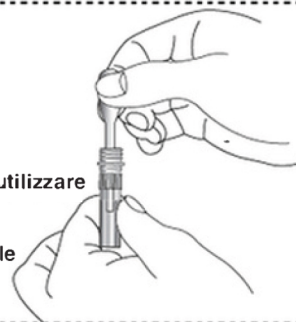

3

Caricamento

4 gocce (100 μ l) del campione diluito

****Non sovraccaricare il campione!!**



4

Lettura

00:05:00~00:10:00



+



Leggere il risultato tra 5 e 10 minuti

-



5

Smaltimento

00:10:00



Smaltire il dispositivo utilizzato
Risultato non valido dopo 10 minuti

